



PicoScope7 Setup

für den Franck-Hertz-Versuch

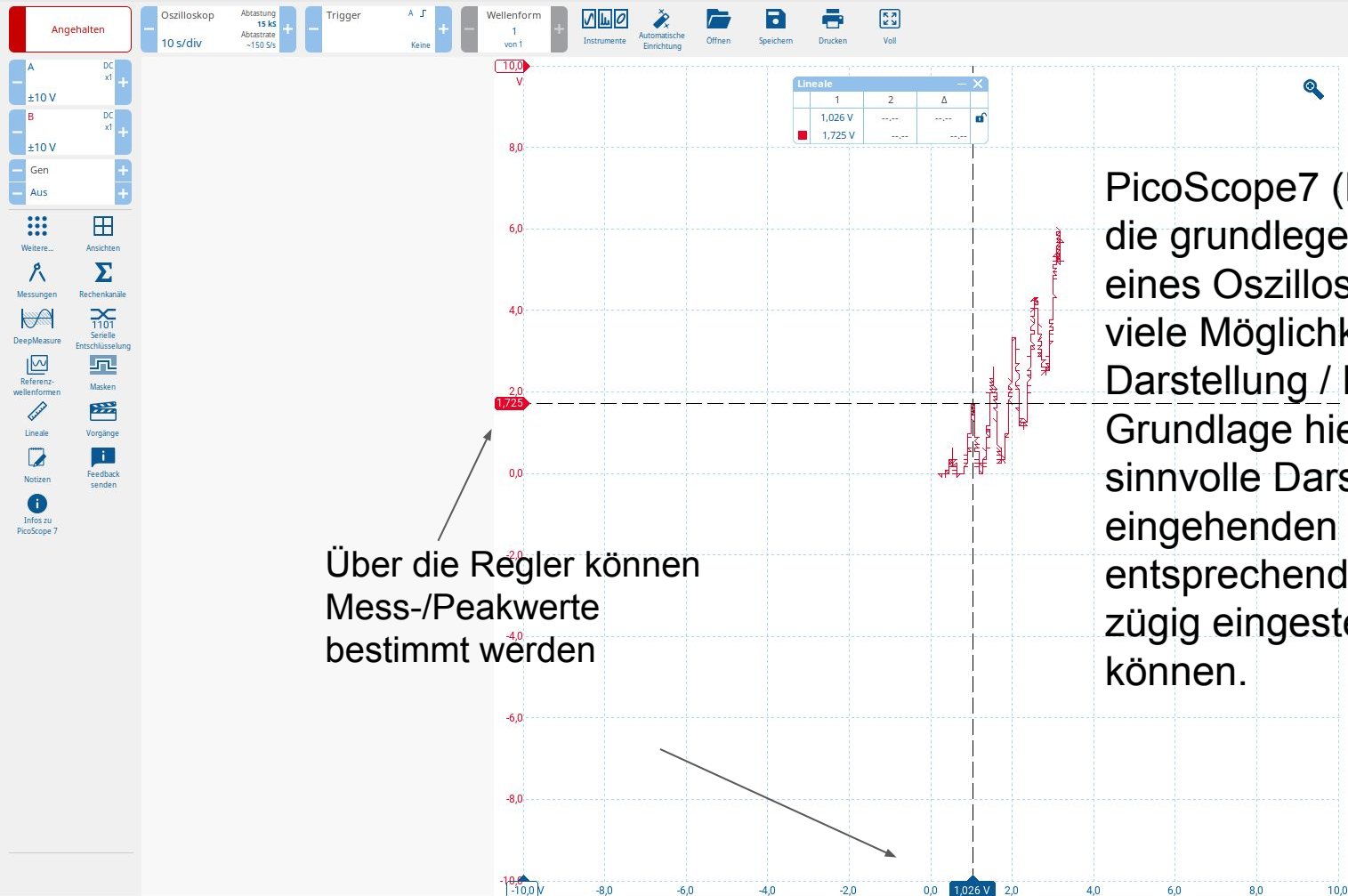



Über die Regler können
Mess-/Peakwerte
bestimmt werden

PicoScope7 (PS7) verfügt über
die grundlegenden Funktionen
eines Oszilloskops und bietet
viele Möglichkeiten der
Darstellung / Datengewinnung.
Grundlage hierfür ist eine
sinnvolle Darstellung der
eingehenden Signale, damit
entsprechende Parameter
zügig eingestellt werden
können.

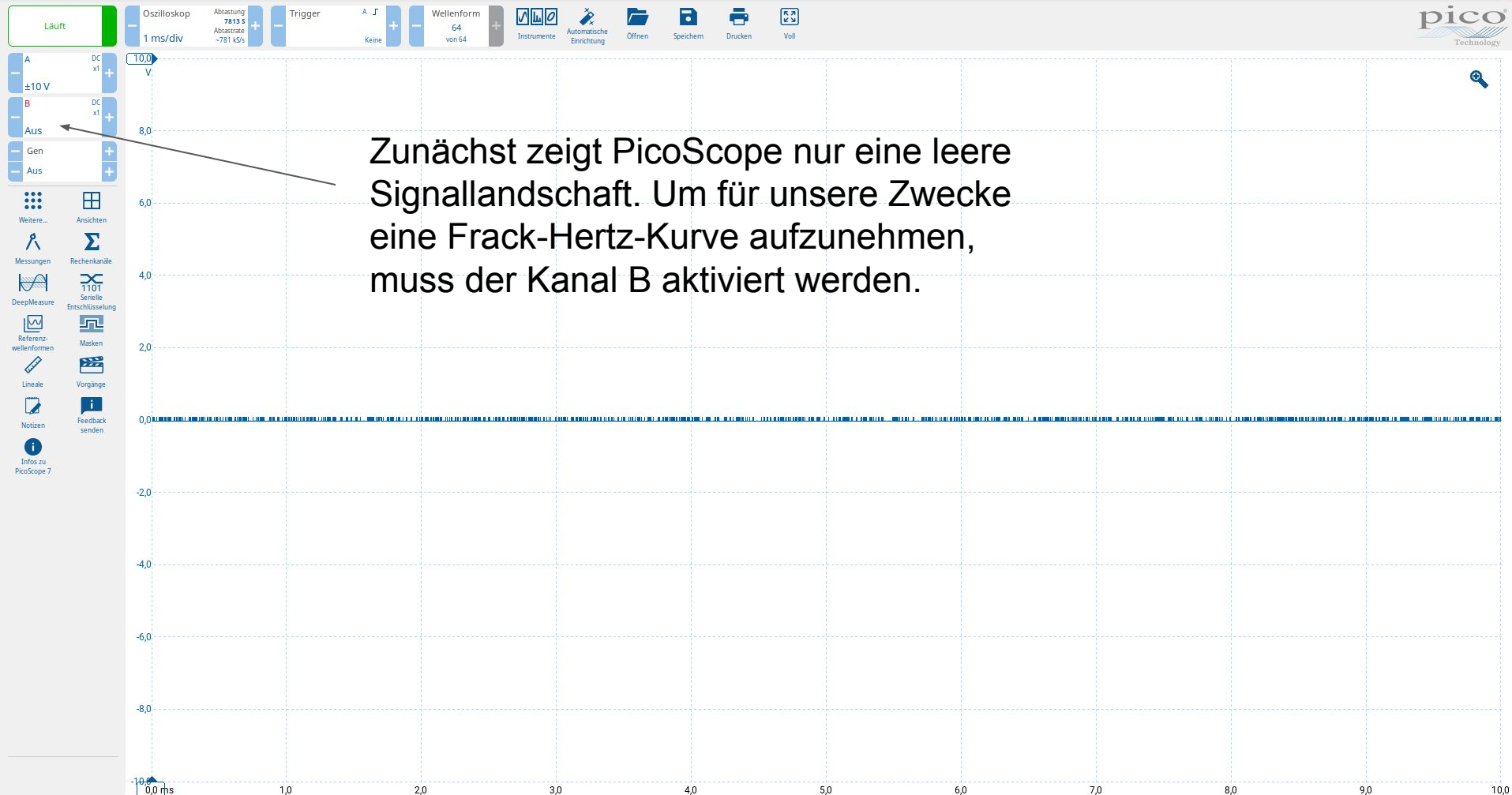



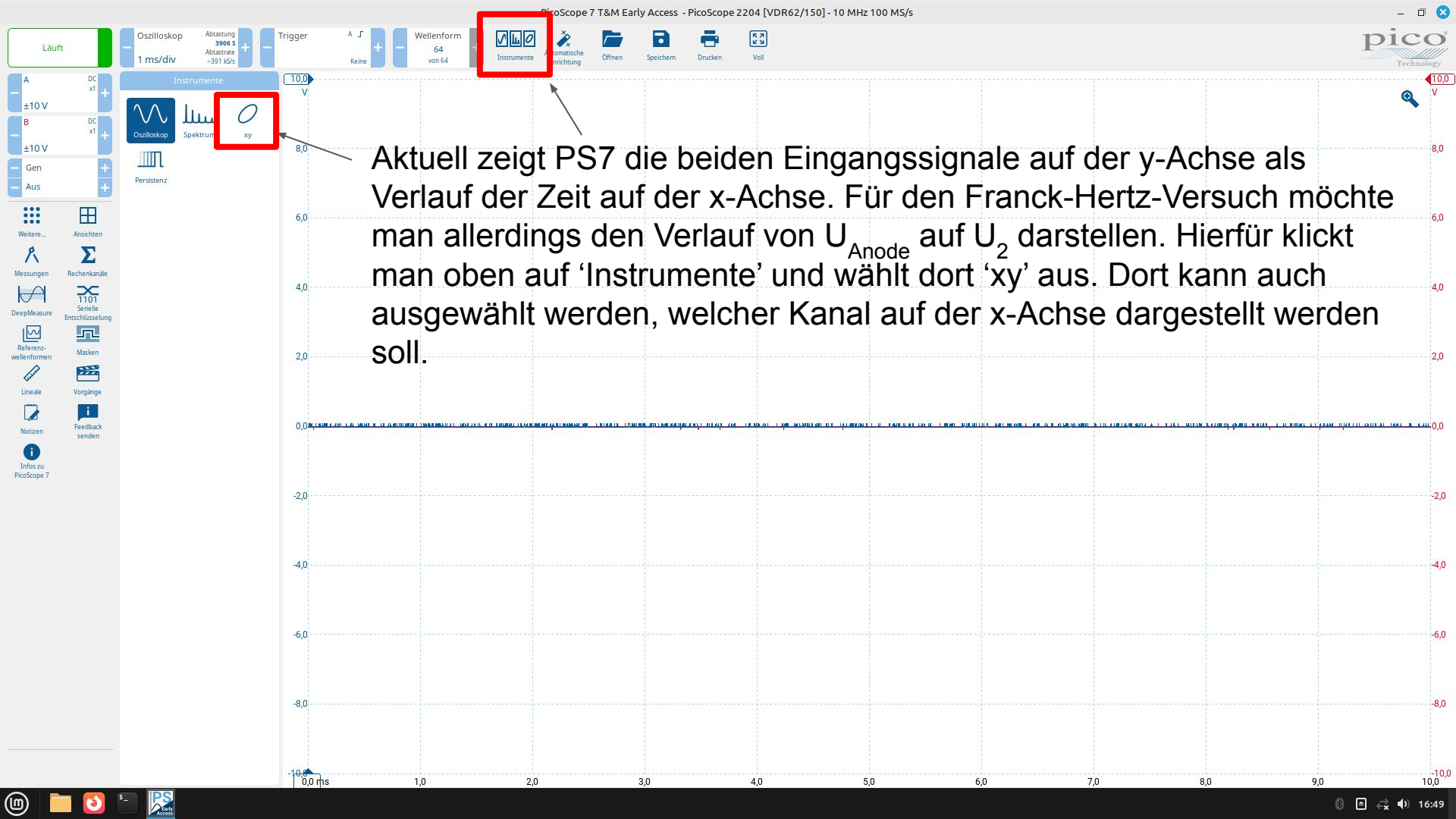

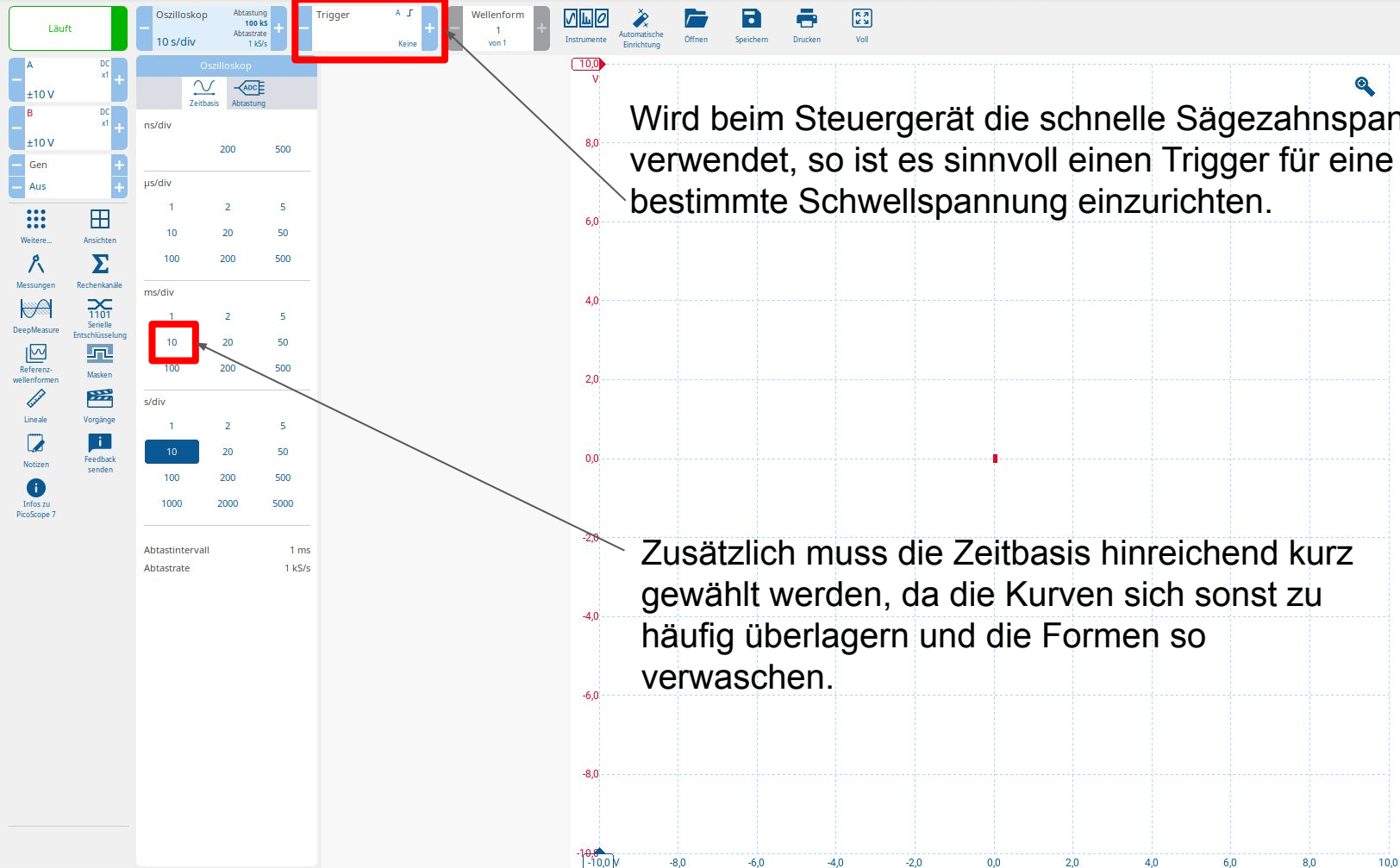

Läuft

Oszilloskop Abtastung 100 kS Abtastrate 1 kS/s

10 s/div

Trigger A J Keine Wellenform 1 von 1

Oszilloskop

Zeitbasis

Priorität Abtastmodus

Pufferspeicher Abtastrate

Sollzahl Abtastungen

100 kS

Progressiver Modus

200 ms/div

Vorige progressive Wellenform

Aus Ein

Abtastintervall 1 ms

Abtastrate 1 kS/s

100 kS

7 8 9 GS


4 5 6 MS


1 2 3 kS

0 S

2 GS

50 S

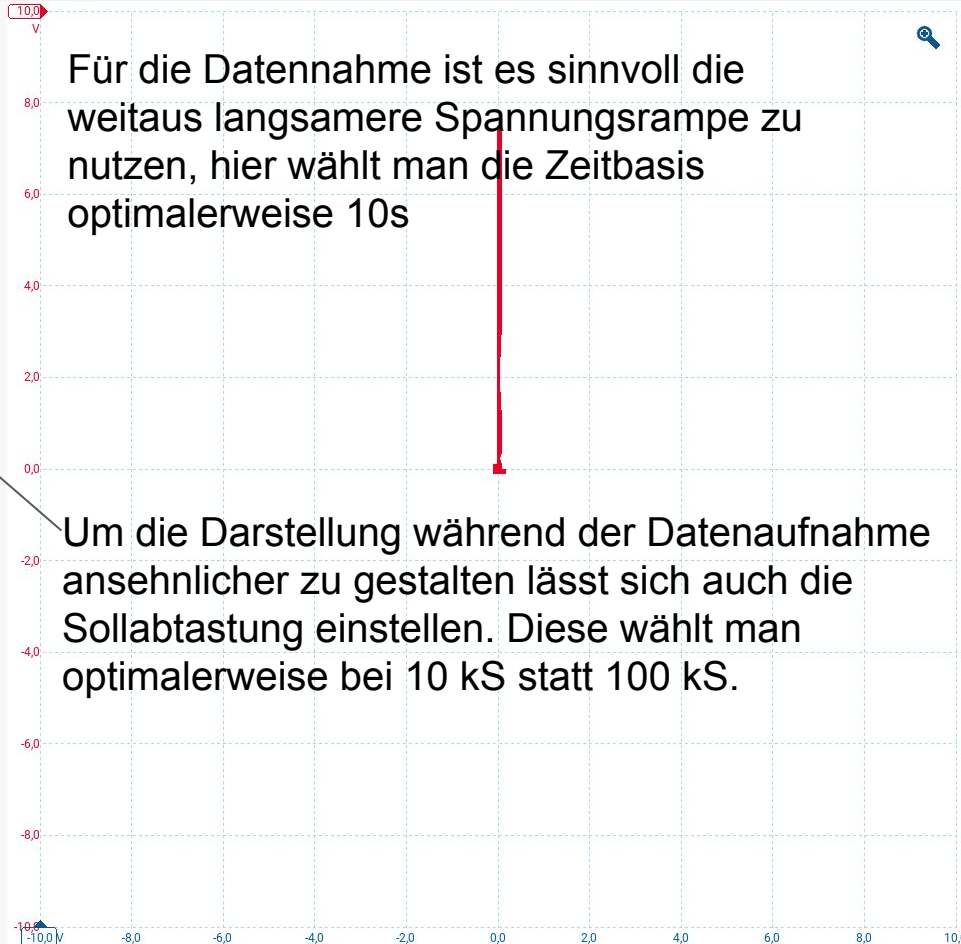

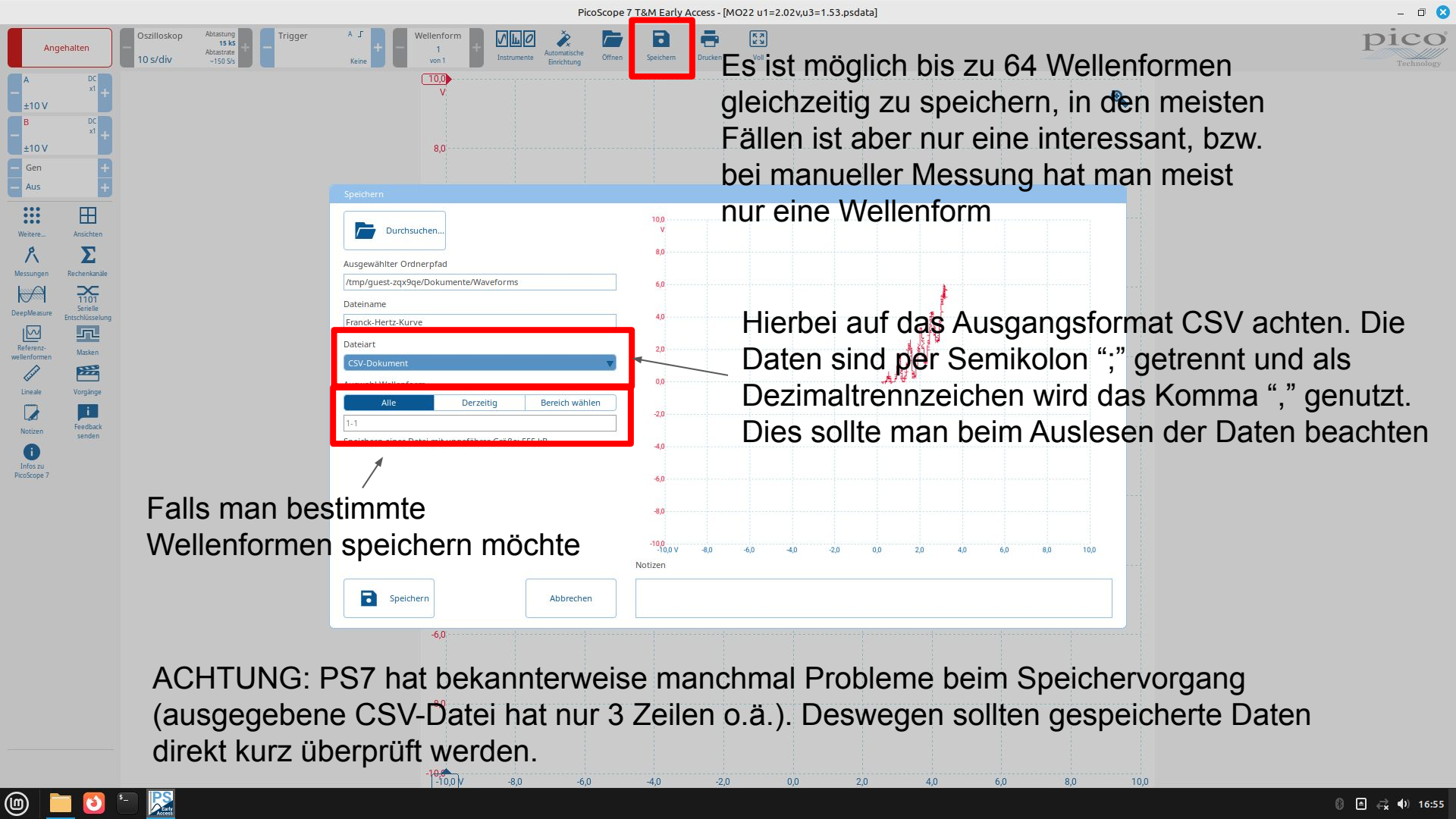

Es ist möglich bis zu 64 Wellenformen gleichzeitig zu speichern, in den meisten Fällen ist aber nur eine interessant, bzw. bei manueller Messung hat man meist nur eine Wellenform

Hierbei auf das Ausgangsformat CSV achten. Die Daten sind per Semikolon ";" getrennt und als Dezimaltrennzeichen wird das Komma "," genutzt. Dies sollte man beim Auslesen der Daten beachten

Falls man bestimmte Wellenformen speichern möchte

ACHTUNG: PS7 hat bekannterweise manchmal Probleme beim Speichervorgang (ausgegebene CSV-Datei hat nur 3 Zeilen o.ä.). Deswegen sollten gespeicherte Daten direkt kurz überprüft werden.